

# Mepilex® Lite


Mousse siliconée Safetac®,  
mince et absorbante

## Coussinet de mousse mince

- Absorbe l'exsudat
- Épouse les formes
- Conserve son intégrité

## Couche de silicone molle Safetac®

- N'adhère pas aux plaies humides
- Adhère délicatement à la peau péri-lésionnelle
- S'enlève sans trauma ni douleur
- Protège contre la macération

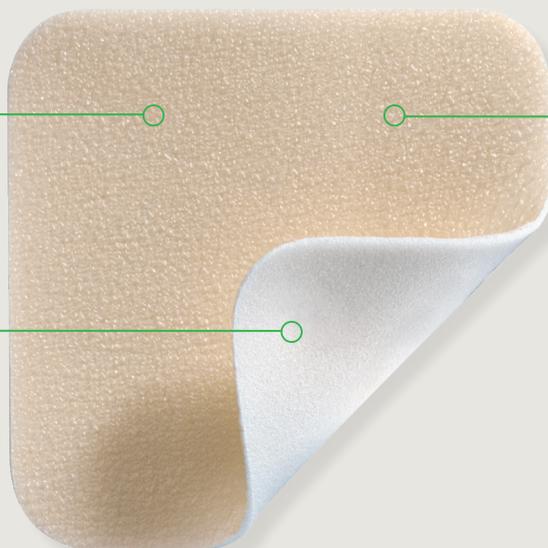

## Pellicule externe

- Perméable à la vapeur d'eau
- Imperméable aux liquides
- Maintient l'humidité de la plaie

**Safetac**  
TECHNOLOGIE

- Atraumatique pour la plaie et la peau péri-lésionnelle
- Mince, souple et absorbante
- Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque de macération

## Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac\*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde<sup>1-3</sup>.


\*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

**Safetac**  
TECHNOLOGIE

Mepilex® Lite

  
Mölnlycke®

## Application de Mepilex® Lite

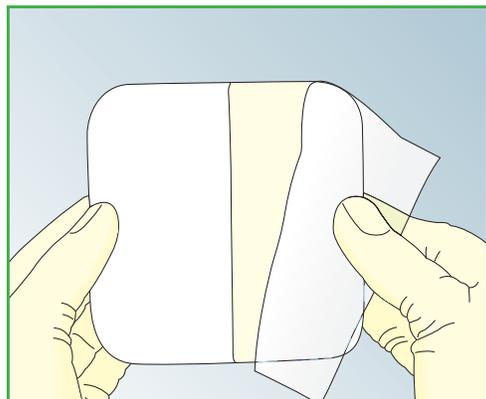


1. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un pansement assez grand pour déborder la plaie de 2 cm.

### Mode d'action de Mepilex® Lite

Mepilex® Lite est une mousse siliconée très souple et mince qui absorbe de petites quantités d'exsudats. La couche Safetac® scelle le pourtour de la plaie pour éviter la macération et assurer le renouvellement indolore des pansements. Mepilex® Lite peut être coupé aux dimensions requises.



2. Retirer une partie de la pellicule antiadhérente et poser Mepilex® Lite à côté de la plaie. Ne pas étirer. Retirer le reste de la pellicule et lisser délicatement sur la plaie.

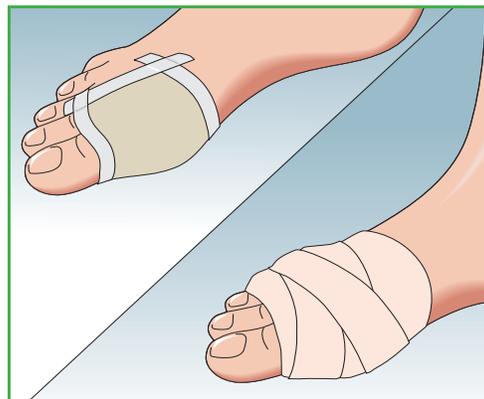

3. Fixer le pansement avec du ruban siliconé Mepitac® ou couvrir d'un bandage non adhésif comme Tubifast®.

## Avantages de Mepilex® Lite

- Atraumatique pour la plaie et la peau péri-lésionnelle
- Minimise le trauma et la douleur associés au renouvellement du pansement
- Minimise le risque de macération
- Épouse bien les formes du corps
- Mince et confortable
- Facile à poser
- Entretient l'humidité de la plaie

## Indications

Mepilex® Lite est destiné aux plaies faiblement ou pas exsudatives comme les ulcères de la jambe et du pied, les plaies de pression, les brûlures du 2° degré, les lésions radio-induites et l'épidermolyse bulleuse. Mepilex® Lite sert aussi de pansement protecteur pour la peau fragilisée. Mepilex® Lite peut s'employer sous compression ou avec des hydrogels.

## Sélection Mepilex® Lite

| No d'article | Format cm (pansement) | Pièces/boîte | Pièces/caisse |
|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 284000       | 6 x 8,5               | 5            | 70            |
| 284100       | 10 x 10               | 5            | 50            |
| 284300       | 15 x 15               | 5            | 50            |
| 284500       | 20 x 50               | 4            | 24            |

