


Mepitel® Film

Pansement à film protège-peau
avec technologie Safetac®

Couche Safetac®

- Réduit la douleur et le traumatisme avant, pendant et après le remplacement des pansements^{1,2,3,5,6}
- Ne colle pas aux plaies humides, seulement à la peau sèche²
- Scelle le pourtour de la plaie et réduit le risque de macération^{3,4}

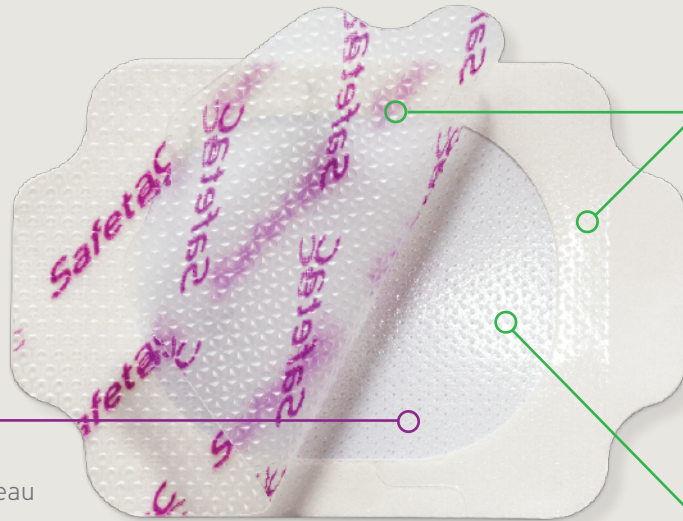

Feuille protectrice
et cadre de papier
facilitant l'application

- Pellicule de polyuréthane transparente, imper-respirante et élastique pour une cicatrisation optimale en tout confort
- Résiste à la douche, aux bactéries et à la barrière virale (microbes →25 nm)

Safetac®
TECHNOLOGIE

- Mepitel® Film est un pansement à film transparent, doux et respirant qui protège la peau.
- Mepitel® Film réduit la douleur et le traumatisme au remplacement des pansements.^{1,2,3,4,5,6}
- Le système d'application de Mepitel® Film est conçu pour faciliter l'utilisation.

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.

*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Safetac®
TECHNOLOGIE

Mepitel® Film


Mölnlycke®

Application de Mepitel® Film



Nettoyer soigneusement la plaie ; assécher la peau périlésionnelle. Retirer la feuille protectrice (Safetac® imprimé) pour exposer l'adhésif.

Pour de meilleurs résultats, Mepitel® Film doit chevaucher la peau périlésionnelle sèche de 1 à 2 cm pour les dimensions allant jusqu'à 10 x 12 cm. Pour les plus grands formats, le pansement doit chevaucher la peau périlésionnelle de 5 cm pour garantir l'adhérence.



Placement du pansement. Mepitel® Film peut être déplacé aussi longtemps que le cadre de papier est intact. Retirer le cadre de papier blanc. Ne pas étirer le pansement lors de l'application.



Lisser uniformément le pansement sur la peau. Mepitel® Film peut être retiré sans décollement cutané ni douleur.

Mode d'action de Mepitel® Film

Mepitel® Film procure une couche transparente et souple qui protège la peau ou la plaie contre la contamination microbienne, les fuites de liquides et autre contamination externe, tout en épousant les surfaces irrégulières et les formes du corps. Mepitel® Film maintient l'humidité de la plaie. Très perméable à la vapeur d'eau, il permet à l'excès d'humidité de s'évaporer de la plaie et de la peau. La couche Safetac® procure une adhérence instantanée qui n'exige pas de pression supplémentaire pour demeurer bien en place. La couche Safetac® permet également les remplacements de pansements atraumatiques. Mepitel® Film ne laisse aucun résidu et le degré d'adhérence n'augmente pas pendant le port.

Indications*

Le pansement Mepitel® Film est indiqué dans le traitement de nombreuses plaies superficielles, telles que les escarres de stades I et II et les brûlures superficielles. Il aide également à éviter tout traumatisme cutané. Il protège les peaux sensibles et fragiles.

Le pansement Mepitel® Film peut également être utilisé comme couche protectrice pour les plaies chirurgicales ouvertes (p. ex. abdominales), comme élément secondaire d'un pansement primaire et en association avec des gels et des pommades.

Fréquence des remplacements

Mepitel® Film peut être laissé en place pendant plusieurs jours selon l'état de la peau ou de la plaie, ou tel qu'indiqué par la pratique clinique acceptée.

Sélection Mepitel® Film

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Avantages de Mepitel® Film

- Réduit la douleur et le traumatisme lors des remplacements de pansement
- Réduit le risque d'endommager les nouveaux tissus
- Transparent pour faciliter l'inspection
- Épouse bien les formes du corps et accroît le confort du patient pendant le port
- Barrière contre les bactéries et les virus de plus de 25 nm
- Faible possibilité d'irritation et d'allergies cutanées
- Ne laisse aucun résidu
- Imperméable aux liquides
- Résiste à la douche

Précautions*

- Ne pas utiliser comme fixation primaire pour intraveineuse, canule ni autre perfusion ou tout dispositif essentiel au maintien des fonctions vitales.
- Le Mepitel Film n'est pas un pansement interface et ne laisse pas passer l'exsudat de la plaie à travers le pansement, vers une couche secondaire.
- La superposition de plusieurs produits réduit la perméabilité à la vapeur. Dans ce cas, il se peut que l'excédent d'humidité ne puisse être évacué de la peau.
- Si des signes d'infection apparaissent, consulter un professionnel de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux indiqué.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.

